

使用說明書

KSIMD02

中型助步車

無段式
把手
高度調整


腳煞車

三段式
調節輪

框架
折疊式

拐杖架

反光
設計

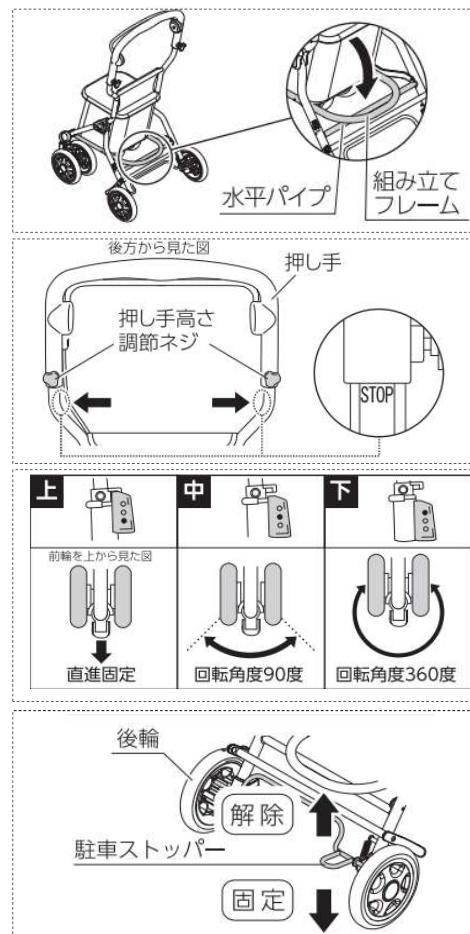

型號	KSIMD02-BR(花漾咖啡) · KSIMD02-CB(條紋黑) · KSIMD02-NV(花漾海軍藍)(請圈選您購買品項)		顏色	花漾咖啡 · 條紋黑 · 花漾海軍藍
JAN	4938765 005519(花漾咖啡) · 4938765 005601(條紋黑) · 4938765 008916(花漾海軍藍)		購買日期	年 月 日
操作方式	<ul style="list-style-type: none"> ●後方水平桿向下壓，即可展開車身。 ●手把邊側插銷拔起，即可調節高度。 ●前輪處有車輪調節扣，可三段式調節。 ●腳踩煞車，坐下休息前，請務必確認是否已固定車輪。 		材質	本體：鋁合金 座面·袋：尼龍·聚酯
使用對象者	自己可步行者		生產國	中國
組裝尺寸	430 x 500 x 850 ~ 915mm		本體附屬品	-
折疊尺寸	430 x 345 x 915mm		可選配件	-
座面尺寸	寬260 x 長240 x 座面高450mm		注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ●手握手剎車及腳踩固定煞車時，請勿步行。 ●離開車體時，務必確認是否將車輪固定。 ●非輪椅，禁止載人推行。
前輪直徑	150mm	後輪直徑		
重量	4.0kg		進口商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578
袋容量	約12L ※按包袋的尺寸計算			
內箱尺寸	寬425x長300x高930mm	內箱的裝入數量	1台	