

使用說明書

KSLT10

段式把手
高度調節
(單鍵式)

腳煞車

側邊
煞車把

三段式
調節輪

座面
折疊式

反光
設計

拐杖架

標準型助步車

選用時尚的北
歐風格布料！

寬36.5cm ·
寬敞的座面 ·
方便休息。

當看到紅線時 ·



橘色北歐風







黑色北歐風



告知車輪替換時期功能



折疊時

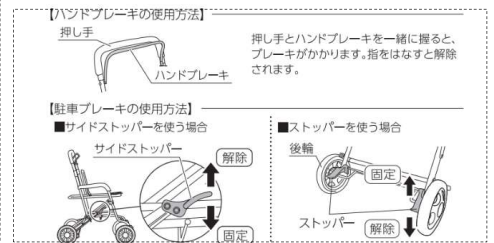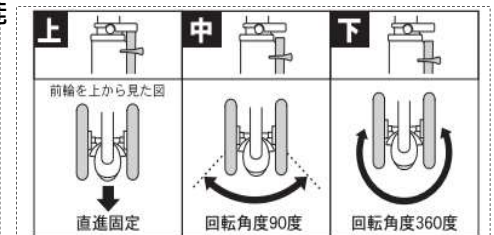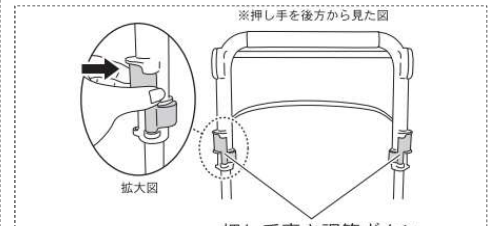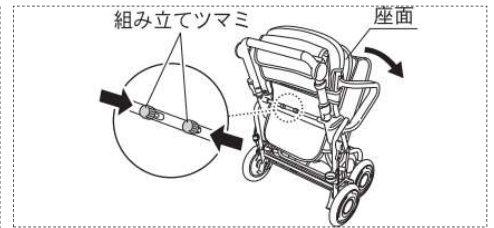

衛部醫器陸輸壹字第003375號



シルバーカー

鋁件
抗腐蝕
處理

最大
積載荷重
10kg

後袋の
最大積載荷重
0.5kg

最大使用者
體重
100kg

品番	KSLT10-DA (橘色北歐風) · KSLT10-BK (黑色北歐風) (請圈選您購買品項)		顏色	橘色北歐風 · 黑色北歐風
JAN	4938765 009340 (橘色北歐風) · 4938765 009333 (黑色北歐風)		購買日期	年 月 日
操作方式	<ul style="list-style-type: none"> ●後側兩邊扳扣向內夾，即可開展及折疊車身。 ●下押手把兩邊調節鈕，即可調節高度。 ●前輪處有車輪調節扳扣，可三段式調節。 ●煞車功能，含手煞車、腳踩煞車及側邊煞車。 		材質	本體：鋁合金 座面、袋：尼龍、聚酯纖維
組裝尺寸	寬545×長640×高815~940mm		生產國	中國
折疊尺寸	寬545×長370×高770mm		本體附屬品	-
座面尺寸	寬365×長270×座面高440mm		可選配件	-
包袋尺寸	(前) 寬310×長460×高200mm (後) 寬315×長120×高160mm		使用對象者	自己可步行者
前輪尺寸	190mm	後輪直徑	190mm	注意事項 ●手握手剎車和停車鍵時，請勿步行。 ●離開車體時，必須剎車。 ●非輪椅，禁止載人行走。
重量	約6.6kg		進口商 杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578	
包袋容量	(前)約23L (後)約5L ※按包袋的尺寸計算			
商品箱尺寸	寬545×長360×高780mm	商品箱入數		1台