



使用說明書

RHB49230

快速軌道式斜坡

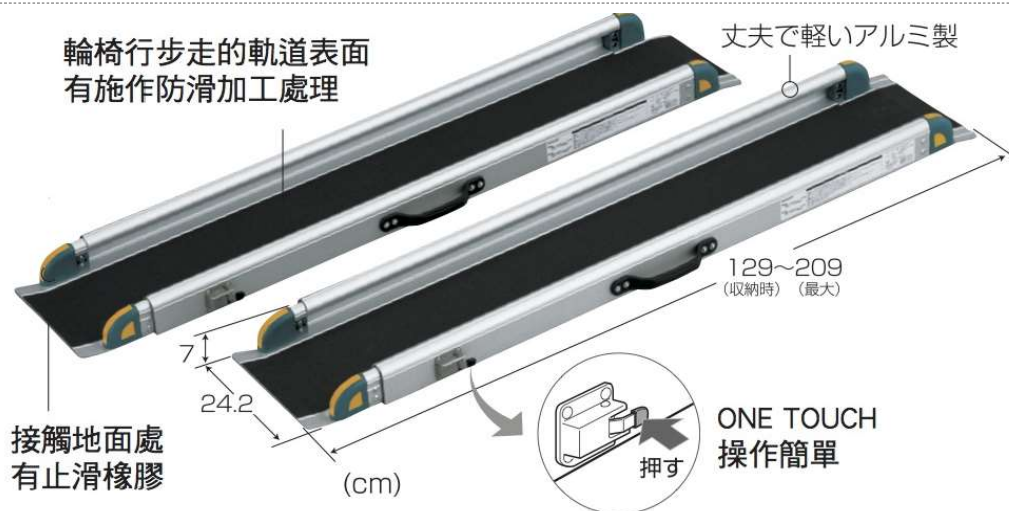

斜坡長度和適用高低差的高度標準

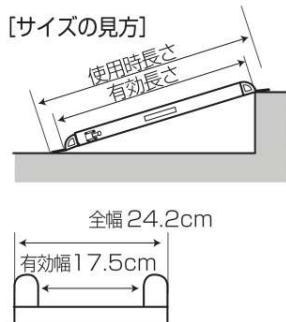

斜坡長度		參考高度	
使用時長さ	有効長さ	自走の場合	介助の場合
129cm	119cm	約10~14cm	約20~23cm
149cm	140cm	約11~17cm	約23~28cm
169cm	160cm	約13~20cm	約26~32cm
189cm	180cm	約15~22cm	約30~36cm
209cm	200cm	約17~25cm	約33~40cm

收納尺寸:129x27.5x7cm(一支)

品番	快速軌道式斜坡 RHB49230			
JAN	4973655492307			
購買日期	年 月 日	生產國	台灣	保證書 有 (購入日起1年內)
商品尺寸	24.2*7*129~209 cm	操作	安放的重點是能配合使用者安全的角度 獨立使用時 約5°~7° 有看護協助時 約10°~12°	
重量	7.5kg(一支)、15kg(一對)			
耐重量	150kg(一支)、300kg(一對)			
材質	鋁			
注意事項	以下幾種輪椅無法配合使用： *電動三輪車 *車軸與地面高度低於8cm之輪椅 *車輪寬度超過13cm之輪椅	進口商	杏豐實業股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-6635-8858 統編:16998578	